

## ITALIANO

- Svitare il tappo del flacone monouso (fig.1).
- Inserire lo stoppino nel foro del flacone monouso (fig.2), fino a farlo appoggiare al fondo del flacone, facendo in modo che resti il più dritto possibile (fig.3).
- Avvitare il flacone all'innesto flacone facendo attenzione che lo stoppino entri perfettamente, senza piegarsi, nel foro presente all'interno dell'innesto (fig.4).

### AVVERTENZE:

- Non avvitare il flacone alla pistola senza lo stoppino.
  - Se durante l'uso del prodotto non si nota un consumo dell'HPMED, vuol dire che lo stoppino non è stato inserito correttamente o che si è piegato all'interno del flacone.
- Svitare il flacone e ripetere la procedura di inserimento facendo attenzione a porlo correttamente.

## FRANÇAIS

- Dévissez le bouchon du flacon jetable (fig.1).
- Introduisez la mèche à travers le trou du flacon jetable (fig.2) jusqu'à ce qu'elle touche le fond du flacon, en faisant en sorte qu'elle reste bien droite (fig.3).
- Vissez le flacon au branchement flacon en veillant à ce que la mèche entre parfaitement, sans se tordre, dans le trou à l'intérieur du branchement (fig.4).

### AVERTISSEMENTS:

- Ne vissez pas le flacon au pistolet sans la mèche.
- Si durant l'utilisation du produit, le niveau de HPMED ne baisse pas, cela signifie que la mèche n'a pas été introduite correctement ou qu'elle s'est tordue à l'intérieur du flacon. Dévissez le flacon et répétez la procédure, en veillant à introduire correctement la mèche.

## ESPAÑOL

- Desenroscar el tapón del frasco monouso (fig.1).
- Introducir la mecha en el orificio del frasco monouso (fig.2) hasta que toque el fondo del frasco, procurando que quede lo más recto posible (fig.3).
- Enroscar el frasco en el acoplamiento del frasco prestando atención a que la mecha entre perfectamente, sin doblarse, en el orificio presente dentro del acoplamiento (fig.4).

### ADVERTENCIAS:





- No enroscar el frasco a la pistola sin la mecha.
  - Si, durante el uso del producto, no se nota un consumo de HPMED, quiere decir que la mecha no se ha introducido correctamente o que se ha doblado dentro del frasco.
- Destornillar el frasco y repetir el procedimiento de introducción prestando atención a colocarla correctamente.

## DEUTSCH

- Den Verschluss der Einwegflasche abschrauben (Abb.1).
- Den Abgabedocht in die Öffnung der Einwegflasche einführen (Abb. 2), bis er den Boden der Flasche berührt. Darauf achten, dass er möglichst gerade bleibt (Abb.3).
- Das Fläschchen in den Anschluss eindrehen. Darauf achten, dass der Abgabedocht korrekt in das Loch im Anschluss eingeführt wird, er darf nicht verbogen werden (Abb.4).

### WARNHINWEISE:

- Das Fläschchen nicht ohne Abgabedocht an der Pistole befestigen.
  - Sollte während des Gebrauchs des Produktes festgestellt werden, dass kein HPMED verbraucht wrd, wurde der Abgabedocht nicht korrekt eingesetzt oder hat sich im Fläschchen verbogen.
- Die Flasche wieder abschrauben und den Vorgang wiederholen, dabei darauf achten, dass der Abgabedocht korrekt sitzt.

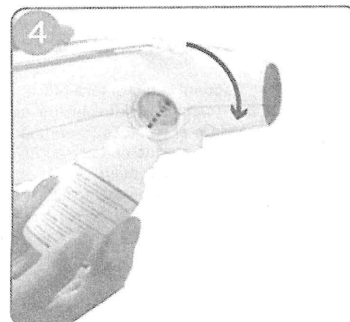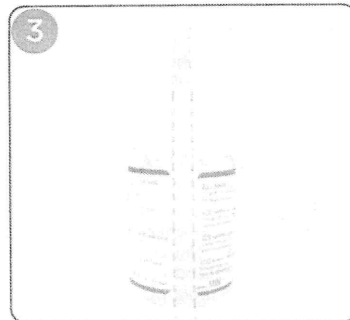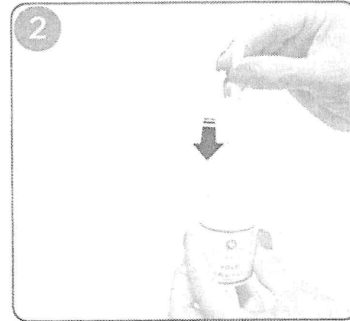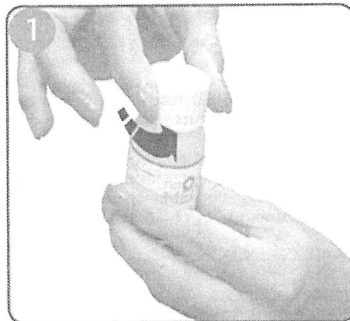

hp+  
MED

